

# RETRACTORPAD<sup>®</sup>


## MONDOMED PVA SÅRHOLDER TIL ABDOMINAL KIRURGI

### INDIKATIONER

Retractorpad er en PVA sårholder designet til brug i alle former for åben kirurgi. Den yder optimal beskyttelse af tarme og retroperitoneale blodkar, og sikrer minimal pres på diaphragma. Samtidig er den medvirkende til at holde tarme udenfor det kirurgiske operationsfelt, så det kirurgiske team har optimale arbejdsforhold. Den er fleksibel og nem at tilpasse operationsfeltet og den kan skæres til uden at der tabes materialefibre. Der udover har den en fantastisk absorptionsevne svarende til 1,5 x egen vægt.

### EGENSKABER

- **Materiale:** Mikroporøs PVA skum (Poyvenyl Alcohol). Præ-fugtet m. sterilt vand.
- U-design for optimal pasform i operationsfeltet
- Immunologisk inert og gammasteriliseret - - sterilt pakket i dobbelpakning.
- Integreret røntgentråd
- To størrelser—Small og Large.

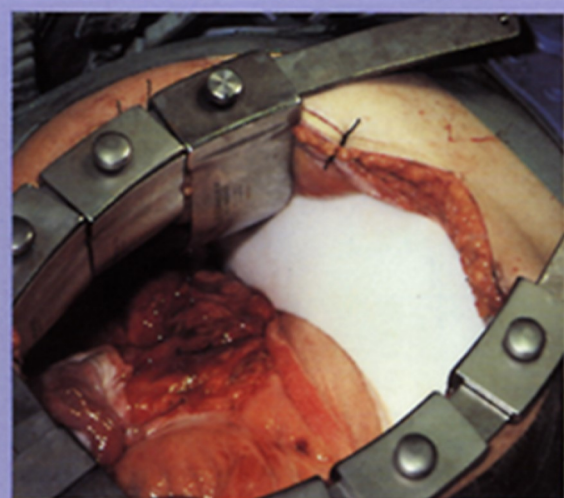

Medistim Danmark

Tel: 2276 5669

[danmark@medistim.com](mailto:danmark@medistim.com)

# MEDISTIM